

«...ерждаю»
Президент
ООО «ЭЙ ЭНД ДИ РУС»
Иванов И.В.
2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажеры медицинские
Модели: МН-101, МН-102, МН-103, МН-104, МН-105,
МН-106, МН-107, МН-108, МН-109, МН-110
Т/М NOZOMI

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МН-101, МН-102, МН-103, МН-104, МН-105, МН-106, МН-107, МН-108, МН-109, МН-110 – массажеры медицинские – обеспечивают эффективный массаж, имеют устойчивый терапевтический эффект, снимают тяжесть и напряжение мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет, **перед применением следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- Перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.
- Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации, гарантийный талон и упаковку до конца службы прибора.
- Избегайте попадания на прибор брызг воды и др. жидкостей, прямых солнечных лучей.
- Не помещайте прибор в воду.
- Не массируйте влажную кожу.
- Самостоятельно не разбирайте прибор.
- Не бросайте массажер.
- Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора.
- Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к его поломке.
- Осторожно! Высокое напряжение. При включении к сети не касайтесь вилки мокрыми руками

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажеры медицинские, модели: МН-101, МН-102, МН-103, МН-104, МН-105, МН-106, МН-107, МН-108, МН-109, МН-110

Основной блок в корпусе – 1 шт.

Принадлежности:

1. Насадки - 1,2 или 4 шт.
2. Чехол для хранения насадок – 1 шт.
3. Элементы питания – 2 или 4 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Гарантийная карта - 1 шт.
6. Коробка упаковочная картонная - 1 шт.

Функциональные особенности:

- Массажер безопасен и прост в использовании
- Обеспечивает безболезненный и эффективный массаж
- Эффективен при болях в спине, мышечных болях, жировых отложениях в проблемных местах

СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	ВЕС БРУТТО/ НЕТТО, г
<p>МН-101, одна подвижная насадка, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. 10 режимов массажа, функциональный переключатель.</p>	<p>Д:390ММ Ш:120ММ В:120ММ</p>	<p>860/750</p>
<p>МН102, две неподвижные насадки, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель, 2 режима массажа: режим 1 - 3400+/- 34 удара в минуту, режим 2 - 6000+/- 60 ударов в минуту. Лампа инфракрасного излучения.</p>	<p>Д:380ММ Ш:145ММ В:135ММ</p>	<p>1410/1200</p>
<p>МН-103, четыре подвижные насадки, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель. Два режима массажа: режим 1 - 9000+/- 900 ударов в минуту, режим 2 - 12000+/- 1000 ударов в минуту. Лампа излучения (-) ионов. Индикатор излучения ионов. Переключатель ионного излучения.</p>	<p>Д:420ММ Ш:145ММ В:150ММ</p>	<p>1730/1450</p>
<p>МН-104, две насадки, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Чехол для хранения насадок. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Два режима массажа: вибрация, круговое движение.</p>	<p>Д:390ММ Ш:140ММ В:140ММ</p>	<p>1350/1280</p>
<p>МН- 105, две насадки, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Три режима массажа: 3 скорости вибрации.</p>	<p>Д:380ММ Ш:145ММ В:135ММ</p>	<p>1200/1050</p>
<p>МН-106, четыре неподвижные насадки, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель . Два режима массажа: режим 1 - 8000+/- 800 ударов в минуту, режим 2 - 1000+/- 100 ударов в минуту.</p>	<p>Д:410ММ Ш:130ММ В:155ММ</p>	<p>1710/1650</p>

<p>МН-107, две насадки, работает от сети 220В (60Гц), мощность 14Вт. Четыре режима переключения скоростей. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Четыре режима вибрационного массажа.</p>	<p>Д:740ММ Ш:540ММ В:270ММ</p>	<p>640/580</p>
<p>МН-108, одна насадка, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. 2 режима массажа, функциональный переключатель. Функция теплового излучения, поддержания температуры. 4 элемента питания.</p>	<p>Д:380ММ Ш:110ММ В:105ММ</p>	<p>380/320</p>
<p>МН-109, одна насадка, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Режимы массажа: 5 скорости вибрации.</p>	<p>Д:410ММ Ш:130ММ В:108ММ</p>	<p>430/390</p>
<p>МН-110, четыре насадки, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Две скорости массажа.</p>	<p>Д:460ММ Ш:110ММ В:100ММ</p>	<p>560/490</p>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Установите переключатель в положение «О». Включите прибор в сеть переменного тока, если прибор работает от сети.

Выберите нужный режим и продолжительность процедуры массажа по совету Вашего врача.

Установите функциональный переключатель в положение I или II

При необходимости ионного или инфракрасного излучения установите переключатель ионного или инфракрасного излучения в положение **ON**

Для эффективного массажа рекомендуется сначала провести массаж рук, затем ног, спины.

Продолжительность массажа не должна быть более 10 минут

По окончании массажа установите функциональный переключатель в положение **О**

Отключите прибор

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Снимите крышку отсека для элементов питания на панели прибора, осторожно нажав на нее в направлении, указанном стрелкой.
2. Установите 2 или 4 новых элемента питания типа АА, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не оставляйте отработанные элементы питания внутри прибора.
- Замените элементы питания на новые при появлении на дисплее символа низкого напряжения элементов питания.
- Элементы питания входящие в комплект прибора служат для проверки работоспособности прибора и их срок службы может быть короче, чем срок службы рекомендованных элементов питания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Температура в эксплуатации от +10 до +40

Температура хранения от -10 до +60

Влажность в эксплуатации от 30% до 85%

Влажность при хранении от 30% до 95%

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Оберегайте приборы от загрязнения, резкого перепада температур, повышенной влажности и ударов.

Протирайте корпус прибора сухой мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, спирта, бензина и влажной ткани.

Храните прибор в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с прибором, чтобы избежать поражения электрическим током или травмирования.

Не используйте и не храните зарядное устройство или сетевой адаптер в местах с повышенной влажностью воздуха.

Избегайте воздействия на прибор высоких температур и прямого солнечного света.

УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Серийные номера приборов компании Ай Си Эс Ти включают в себя дату изготовления прибора.

Серийные номера имеют следующий вид: SN B0812 000001, где информативными являются выделенные цифры 0812

08 – год производства, 12 – месяц производства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные сроки службы установлены в соответствии со статьями № 470 и №471 ГК РФ и статьей №19 пункт 3 Закона «О защите прав потребителей» (с изменениями от 30 декабря 2001 г).

Массажеры медицинские соответствует требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год.

Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение одного года, начиная со дня покупки.

При обнаружении каких-либо дефектов следует обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр для проверки, ремонта или замены.

Данная гарантия не распространяется на отделочное покрытие прибора. Кроме того, гарантия прекращается в случае, если повреждение прибора вызвано его неправильным использованием или обслуживанием, попыткой его ремонта неавторизованной сервисной службой, а также попыткой модификации прибора.

Прибор надлежащего качества не подлежит возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, расцветки или комплектации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, в редакции Постановления Правительства РФ от 20 октября 1998 года №1222, от 06 февраля 2002 года № 81.

ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ICST Corporation, Япония, Legal/mail address: S-4 Tower 2F, 5-17-1 Kamiochiai, Chuoh-ku Saitama-shi, Saitama 338-0001 JAPAN

АЙ-СИ-ЭС-ТИ КОРПОРЕЙШН юридический/почтовый адрес: С-4 Тауэр 2Ф, 5-17-1 Камиочияй, Чюо-Ку Саитама-ши, Саитама 338-0001, Япония

Произведено на заводе Vega Технолоджи Инк., Китай адрес





Vega Technologies Inc. address : Yang-Wu District, Da Lang Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, China)


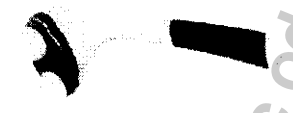



ФИРМА-ИМПОРТЕР

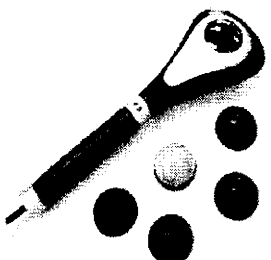
ООО «Эй энд Ди Рус», 121357, Москва, ул. Верейская, д.17

Тел.: 8 800-200-03-80

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

КОД МОДЕЛИ	ФОТО	СПЕЦИФИКАЦИЯ	РАЗМЕРЫ	ВЕС БРУТТО/ НЕТТО, г
МН-101		<p>Массажер для тела, одна головка, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. 10 режимов массажа, функциональный переключатель, подвижная головка, вращающаяся резиновая накладка.</p>	<p>Д:390ММ Ш:120ММ В:120ММ</p>	<p>860/750</p>
МН-102		<p>Массажер для тела, две головки, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель, неподвижные две головки, вращающиеся пластиковые наконечники. 2 режима массажа: режим 1 - 3400+/- 34 удара в минуту, режим 2 - 6000+/- 60 ударов в минуту. Лампа инфракрасного излучения.</p>	<p>Д:380ММ Ш:145ММ В:135ММ</p>	<p>1410/1200</p>
МН-103		<p>Массажер для тела, четыре головки с резиновыми насадками, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель, подвижные 4 головки. Два режима массажа: режим 1 - 9000+/- 900 ударов в минуту, режим 2 - 12000+/- 1000 ударов в минуту. Лампа излучения (-) ионов. Индикатор излучения ионов. Переключатель ионного излучения.</p>	<p>Д:420ММ Ш:145ММ В:150ММ</p>	<p>1730/1450</p>
МН-104		<p>Массажер для тела с двумя головками, работатет от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Две съемные пластиковые головки, набор сменных пластиковых головок (2шт) и чехол для хранения насадок. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Два режима массажа: вибрация, круговое движение головок. Цвет - серый.</p>	<p>Д:390ММ Ш:140ММ В:140ММ</p>	<p>1350/1280</p>

МН-105		Массажер для тела с двумя головками, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Две съемные пластиковые головки, набор сменных пластиковых головок (2шт) и чехол для хранения насадок. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Два режима массажа: вибрация, круговое движение головок. Цвет - зеленый.	Д:390ММ Ш:140ММ В:140ММ	1350/1280
МН-106		Массажер для тела с двумя головками, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Две съемные пластиковые головки, набор сменных пластиковых головок (2шт) и чехол для хранения насадок. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Два режима массажа: вибрация, круговое движение головок. Цвет - синий.	Д:390ММ Ш:140ММ В:140ММ	1350/1280
МН-107		Массажер для тела с двумя головками, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Две съемные пластиковые головки, набор сменных пластиковых головок (2шт) и чехол для хранения насадок. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Два режима массажа: вибрация, круговое движение головок. Цвет - красный.	Д:390ММ Ш:140ММ В:140ММ	1350/1280
МН-108		Массажер для тела, работает от сети переменного тока 220В (50Гц), мощность 15Вт. 2 режима массажа, функциональный переключатель, неподвижная головка. Функция теплового излучения, поддержания температуры. 4 элемента питания.	Д:380ММ Ш:110ММ В:105ММ	380/320
МН-109		Массажер для тела, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Режимы массажа: 5 скорости вибрации. Зарядное устройство.	Д:410ММ Ш:130ММ В:108ММ	430/390

МН-110		<p>Массажер для тела, работает от сети 220В (60Гц), мощность 15Вт. Набор сменных пластиковых головок (4шт), защитная крышка для инфракрасной лампы. Функциональный переключатель, инфракрасная лампа, индикатор инфракрасной лампы. Две скорости массажа. Сменный сетевой адаптер.</p>	<p>Д:460ММ Ш:110ММ В:100ММ</p>	<p>560/490</p>
--------	---	--	--	----------------

Принадлежности:

1. Насадки съемные (2-4 шт.)
2. Чехол для хранения насадок (1 шт.)
3. Адаптер сетевой (1 шт.)
4. Элементы питания (2-4 шт.)
5. Зарядное устройство (1 шт.)
6. Руководство по эксплуатации (1 шт.)
7. Гарантийная карта (1 шт.)
8. Коробка упаковочная картонная (1 шт.)